

Curvocone



**Il carico immediato
secondo la Giorgi Chairside Technique**

La componente protesica

Curvocone

Il **pilastro Curvocone**, realizzato in collaborazione con **Angelo Giorgi**, è stato appositamente realizzato per ottimizzare l'applicazione della G.C.T. e **rendere ancora più semplici ed efficienti i passaggi protesici**.

Curvocone

Scopri l'originale pilastro che rende ancora più semplici ed efficienti i passaggi protesici nella realizzazione di una protesi immediata.

Il **carico immediato implantare** è una procedura molto gradita ai pazienti che vedono ridurre drasticamente i tempi del trattamento.

Anche per il clinico è una procedura che ha molti vantaggi tra cui, conseguenza della riduzione dei tempi, vi è una riduzione dei costi. Ma durante la fase clinica, dall'inserimento dell'impianto alla realizzazione della protesi, tutto deve funzionare perfettamente:

I protocolli devono essere corretti, le componenti utilizzate le più adatte.



prima



dopo

La **Giorgi Chairside Technique (G.C.T.)** è un protocollo protesico di carico immediato che realizza una **struttura in titanio rigida** grazie all'impiego di specifiche componenti e della **saldatura laser**.

Su questa struttura viene **finalizzata la protesi immediata nello stesso giorno della chirurgia**.

1. **Chirurgia (h. 9:00)**
2. **Scelta dei pilastri in base alla prova estetica e al posizionamento implantare**
3. **Impronta posizione pilastri e modello**
4. **Creazione al laser della travata rigida in titanio**
5. **Finalizzazione protesica**
6. **Consegna protesi (h. 17:00)**

Una Rigida Sicurezza



Cilindro da saldatura

Il cilindro da saldatura **Curvocone** è stato realizzato per supportare tutte le tipologie di saldature laser sul titanio, per ottenere una struttura protesica rigida, e robusta, adatta al carico immediato. Con il cilindro da saldatura **Curvocone** e la **Giorgi Chairside Technique** si potranno affrontare le più diverse situazioni cliniche.

Imitare la Natura



Piattaforma Protesica

La piattaforma protesica di tutti i pilastri **Curvocone** ha un **profilo ellittico** che meglio **si adatta ad alveoli post estrattivi e replica in modo più adeguato il profilo del dente**. Inoltre la piattaforma è leggermente inclinata per offrire il profilo migliore ai tessuti anche in caso di riassorbimento e mantenere un'estetica naturale. Esiste **una sola piattaforma protesica** compatibile con tutti diametri implantari per semplificare le procedure dello studio e del laboratorio.

Less is more




Profilo curvo

Il Curvocone è dotato di un **profilo concavo che riduce gli ingombri del pilastro** dalla piattaforma implantare alla connessione protesica.

Il vantaggio di questa soluzione è duplice:

- **Più spazio per i tessuti** che possono svilupparsi in un volume maggiore ed essere più stabili.
- Profili più snelli per **ridurre le interferenze con il tessuto osseo** durante la connessione del pilastro.

Prima l'estetica!

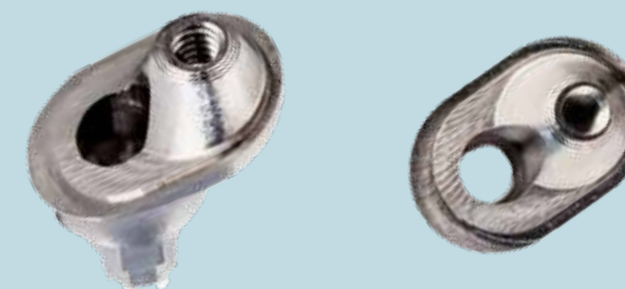

Posizione vite protesica

La vite protesica del pilastro Curvocone non si trova al centro della piattaforma ma in posizione arretrata rispetto alla faccia vestibolare.

Questa posizione offre **maggiore spazio per la struttura protesica** con un duplice vantaggio:

- Realizzazione di una **struttura metallica più robusta**
- **I denti protesici non dovranno essere ridotti indebolendo la struttura.**

Igiene

Le caratteristiche evidenziate sopra concorrono a creare una situazione tissutale assolutamente stabile e dei profili protesici più detergibili con grande **beneficio per l'igiene orale del paziente.**



Sistema Curvocone

Insieme al pilastro **Curvocone** sono stati sviluppati tutti i **componenti ancillari** che completano il sistema, dai cilindri di saldatura e provvisori, agli analoghi e ai coping da impronta compresa a breve anche la componentistica e le librerie digitali.



Linea protesica **Curvocone** connessione interna Certain **BIOMET3i**

■ PILASTRO CURVOCONE DRITTO

codice	piattaforma	altezza
ICUR31	3,4 mm	1
ICUR32	3,4 mm	2
ICUR33	3,4 mm	3
ICUR41	4,1 mm	1
ICUR42	4,1 mm	2
ICUR43	4,1 mm	3

■ PILASTRO CURVOCONE ANGOLATO

codice	piattaforma	altezza	angolazione
ICURA322	3,4 mm	1	20°
ICURA323	3,4 mm	2	20°
ICURA343	3,4 mm	3	40°
ICURA422	4,1 mm	1	20°
ICURA423	4,1 mm	2	20°
ICURA443	4,1 mm	3	40°

Accessori linea protesica **Curvocone**

CURAN	ANALOGO DEL PILASTRO CURVOCONE
CURCIL	CILINDRO DA SALDATURA CURVOCONE
CURVT	VITE DI FISSAGGIO CILINDRO DA SALDATURA CURVOCONE
ICURVIT	VITE DI FISSAGGIO PILASTRO CONNESSIONE INTERNA CERTAIN
CURVITT	VITE DI FISSAGGIO COPING DA IMPRONTA CURVOCONE
CURHC	CAPPETTA DI PROTEZIONE CURVOCONE
CURIC	COPING DA IMPRONTA CON VITE CURVOCONE

Curvocone

